

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0091025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	INCUBADORA PEDIATRICA	MARCA: Brand	DRAGER
MODELO: Model	ISOLETTE C-2000	SERIE: Serial	CB27796
Inventario Institución: Institute Inventory	545144	UBICACIÓN: Location	NEONATOS

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE INCUBADORAS	FLUKE BIOMEDICAL	INCU	60501110	2025-09-10

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-01	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-01
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25,8 °C	Final: End	25,8 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %	Final: End	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrologo
Metrologist

Revisó


MARTÍN LOPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.


El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

El error máximo permitido es tomado de: NTC-IEC60601-2-19
The maximum error allowed is taken from: NTC-IEC60601-2-19

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

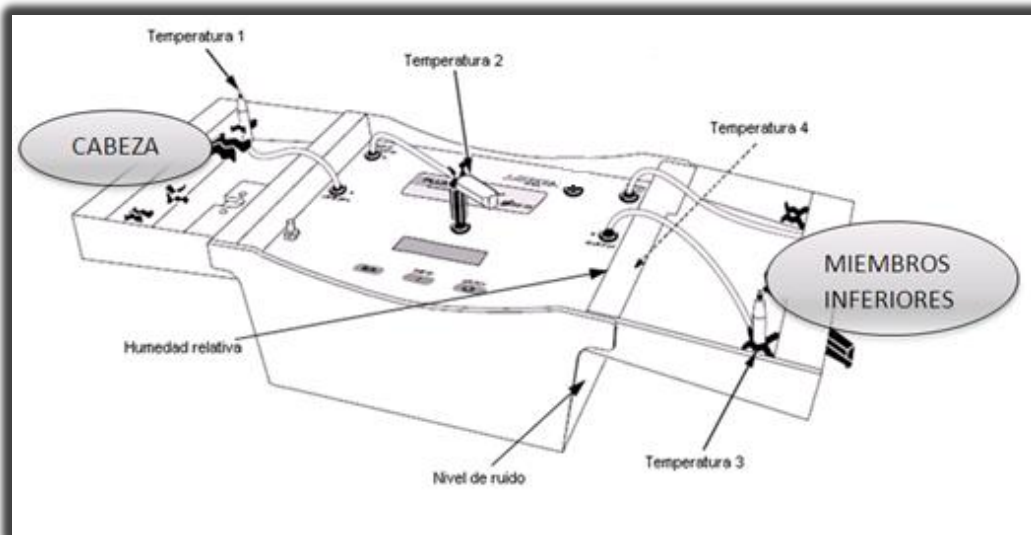


UBICACIÓN DE LOS SENSORES DEL EQUIPO PATRÓN DE CALIBRACIÓN Y SU DISPOSICIÓN EN
ANALOGÍA CON EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE EN EL EQUIPO BAJO PRUEBA

EL SENSOR A PIEL DEL EQUIPO BAJO PRUEBA (SI APLICA) SE UBICA SOBRE EL SENSOR DE TEMPERATURA 2 DEL
EQUIPO PATRÓN DE CALIBRACIÓN


TEMPERATURA 1

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
37	36,95	-0,05	±	0,10	°C

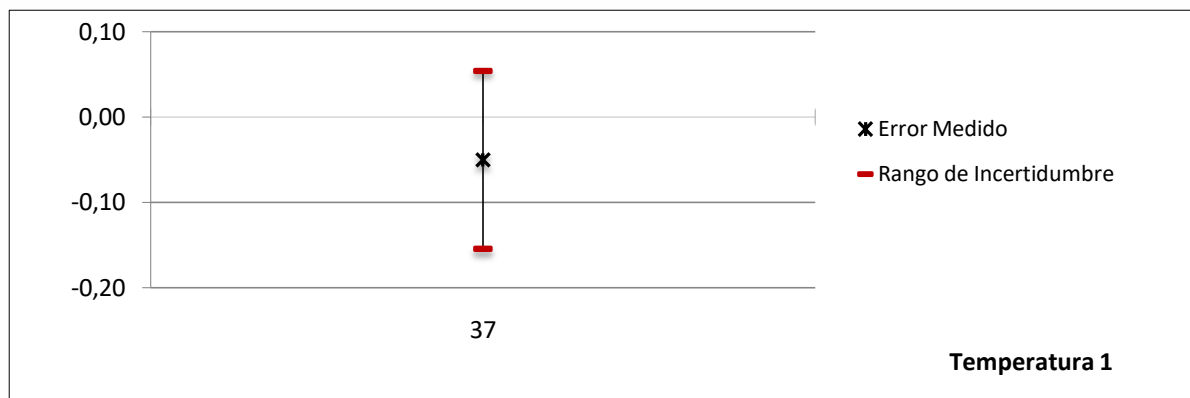

TEMPERATURA 2

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
37,00	36,88	-0,13	±	0,13	

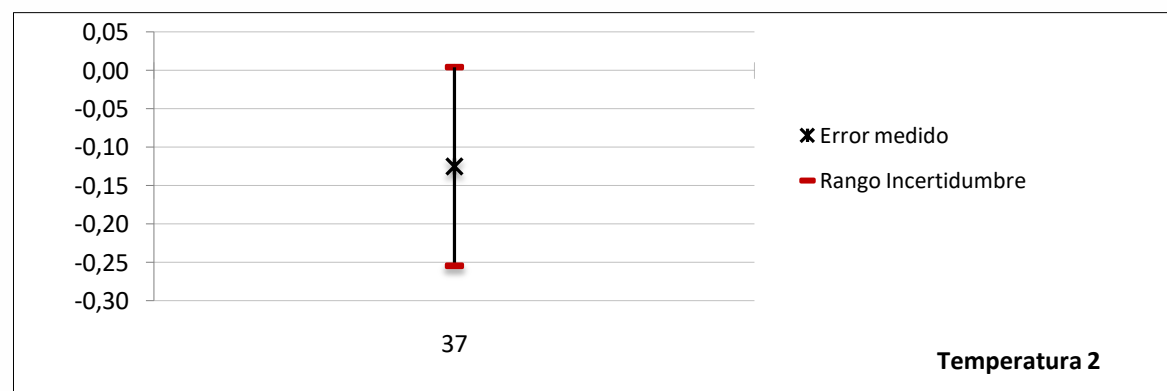


TEMPERATURA SENSOR DE PIEL

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
36,88	36,75	-0,13	±	0,11	

Unidad de la
Medición

TEMPERATURA 3

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
37	37,03	0,02	±	0,13	

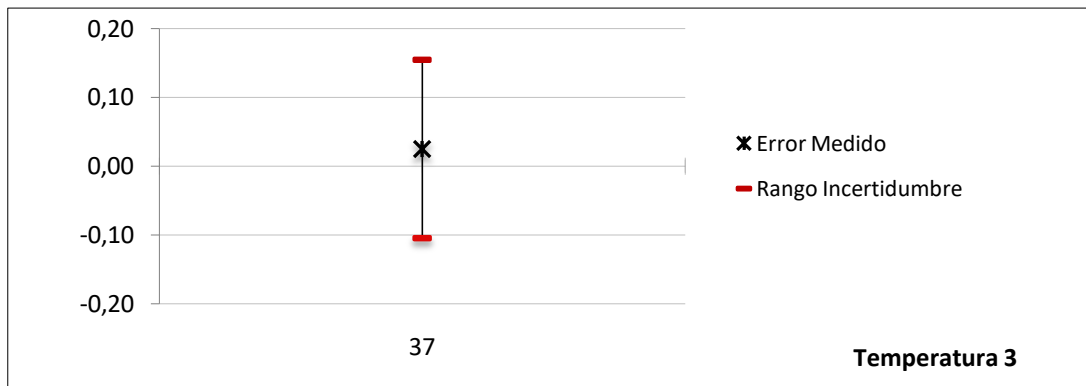

TEMPERATURA BASE

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
37	37,38	0,38	±	0,13	

HUMEDAD RELATIVA

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
70	68,7	-1,35	±	2,09	
					%

NIVEL DE RUIDO

Medición Promedio	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
59,8	±	1,64	
			dB

FIN DEL CERTIFICADO