

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M2181025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA: Brand	MINDRAY
MODELO: Model	BENEVIEW T5	SERIE: Serial	CM-3B134860
Inventario Institución: Institute Inventory	545463	UBICACIÓN: Location	UCI ADULTOS

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-28	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-28
TEMPERATURA Inicial: Temperature	23 °C	Final: End	23 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %	Final: End	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-F0002 - VERSION 01 (5V)

Elaboró



JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrólogo

Metrologist

Revisó



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

Av 30 de Agosto Nro 87- 298

prestacionservicio@coodesuris.com



(6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
80	82.00	2.00	$\pm$	0.82
120	121.00	1.00	$\pm$	0.82
200	199.25	-0.75	$\pm$	0.96


Unidad de la Medición
mmHg

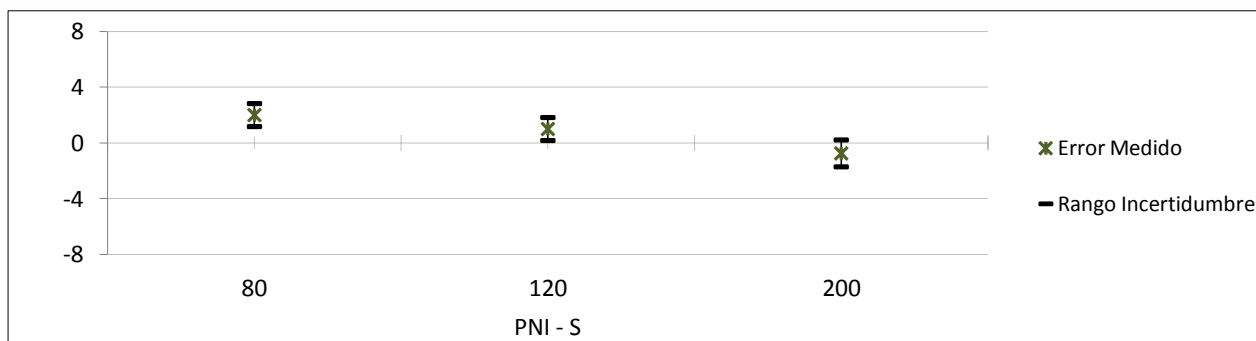

PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
50	51.00	1.00	$\pm$	0.82
80	82.25	2.25	$\pm$	0.96
150	152.50	2.50	$\pm$	1.01


Unidad de la Medición
mmHg

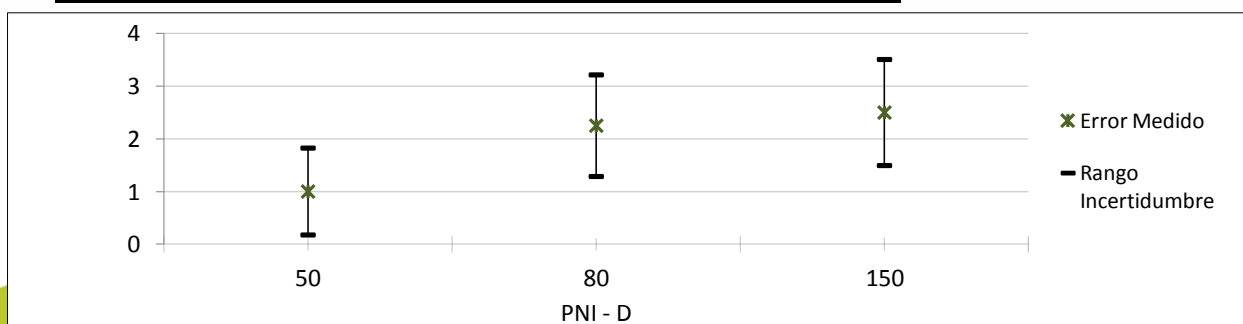

GASTO CARDIACO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
2.5	2.40	-0.10 ± 0.08	0.08
5.0	4.60	-0.40 ± 0.18	0.18
10.0	9.60	-0.40 ± 0.29	0.29


Unidad de la Medición
L / min

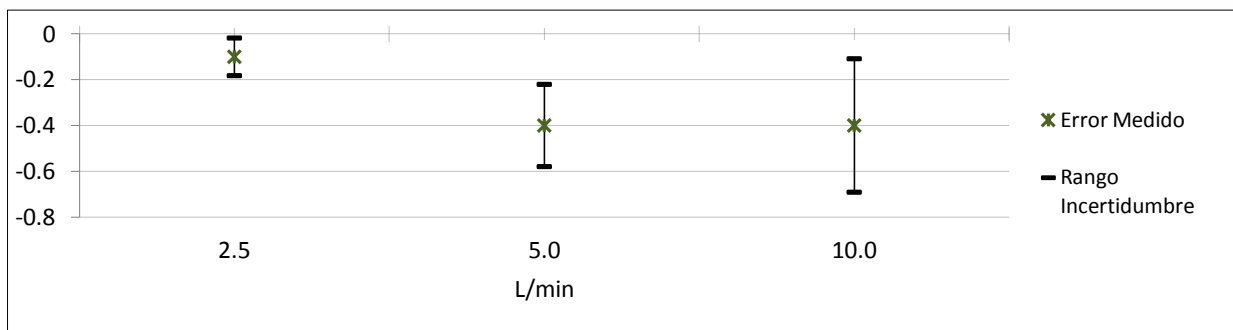

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
75	76.00	1.00 ± 2.27	2.27
85	86.00	1.00 ± 2.27	2.27
95	96.00	1.00 ± 2.27	2.27

Unidad de la Medición
%

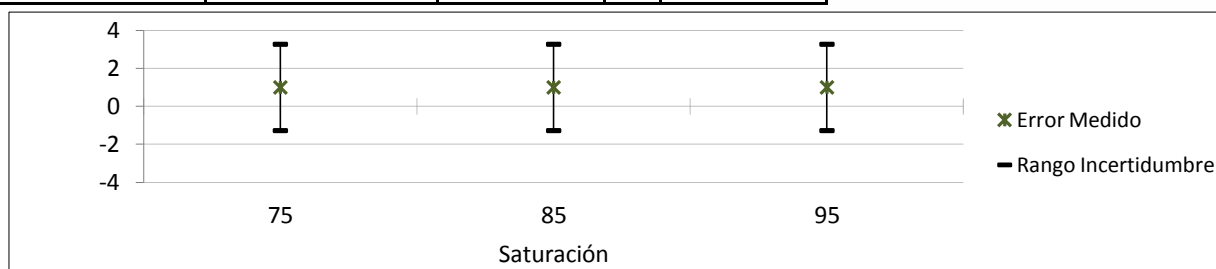

FRECUENCIA CARDIACA SPO2


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	60.00	0.00 ± 0.88	0.88
150	150.00	0.00 ± 0.88	0.88

Unidad de la Medición
BPM

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	60.00	0.00 ± 0.82	0.82
120	120.00	0.00 ± 0.82	0.82
200	200.00	0.00 ± 0.82	0.82

Unidad de la Medición
BPM

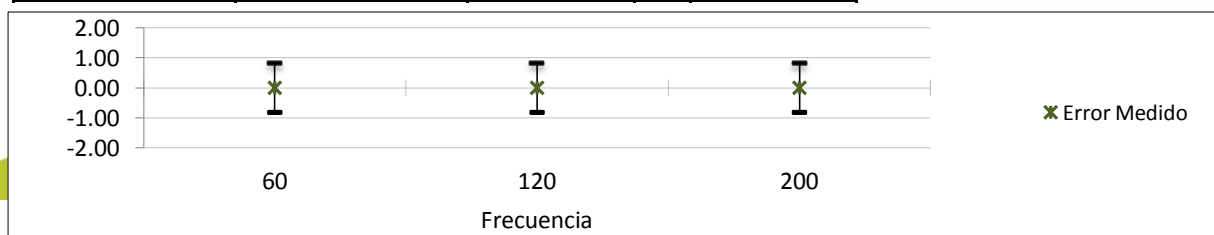

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	59.00	-1.00	±	0.74
120	119.00	-1.00	±	0.85
200	197.00	-3.00	±	1.10

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
30	29.00	-1.00	±	0.65
80	79.00	-1.00	±	0.74
150	149.00	-1.00	±	0.91

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
120	119.00	-1.00	±	0.85

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
80	79.00	-1.00	±	0.74

Unidad de la Medición
mmHg

ARTERIA PULMONAR (AP) IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
25	25.00	0.00	±	0.62
10	10.00	0.00	±	0.62

Unidad de la Medición
mmHg

FIN DEL CERTIFICADO