

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° M3051025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA: Brand	DRAGER
MODELO: Model	VISTA 120 S	SERIE: Serial	S2SNF4418
Inventario Institución: Institute Inventory	573315	UBICACIÓN: Location	INTERMEDIOS ADULTO

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-15	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-15
TEMPERATURA Inicial: Temperature	24 °C	Final: End	24 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	62 %	Final: End	62 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k=2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
80	81,50	1,50	$\pm$	1,01	
120	123,00	3,00	$\pm$	1,16	mmHg
200	202,25	2,25	$\pm$	0,96	

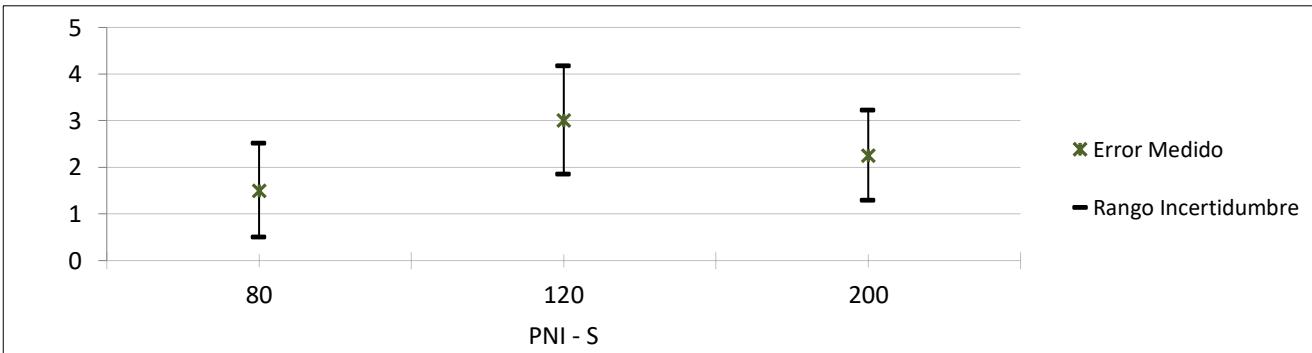

PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
50	52,00	2,00	$\pm$	1,16	
80	81,75	1,75	$\pm$	0,96	mmHg
150	152,25	2,25	$\pm$	0,96	

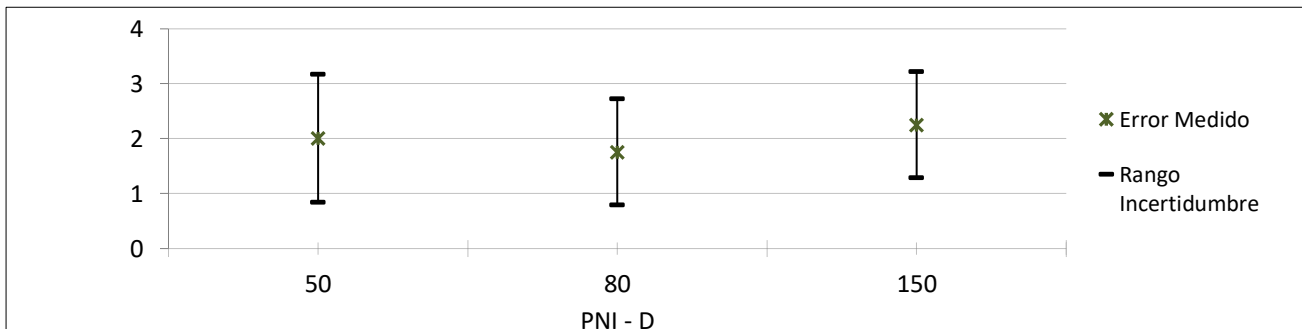

GASTO CARDIACO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
2,5	2,42	-0,09	±	0,08
5,0	4,61	-0,39	±	0,18
10,0	9,40	-0,60	±	0,29


Unidad de la Medición
L / min

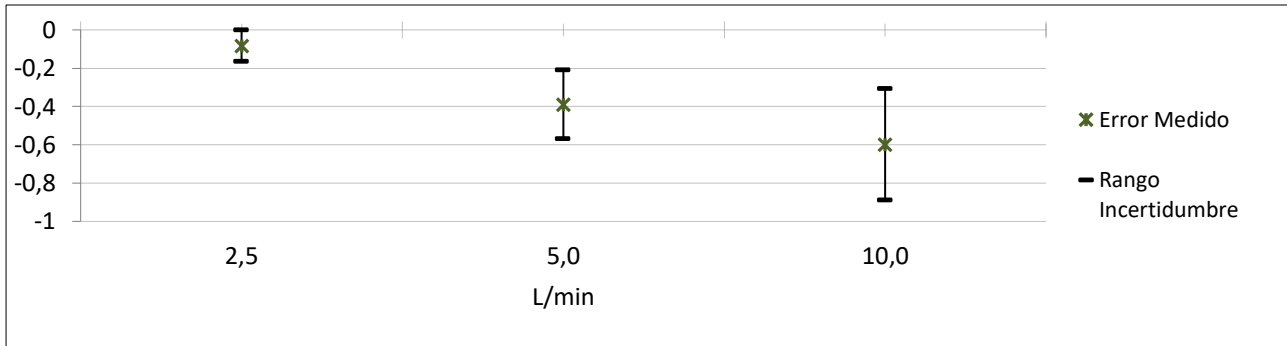

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
75	74,00	-1,00	±	2,27
85	85,00	0,00	±	2,27
95	95,75	0,75	±	2,33

Unidad de la Medición
%

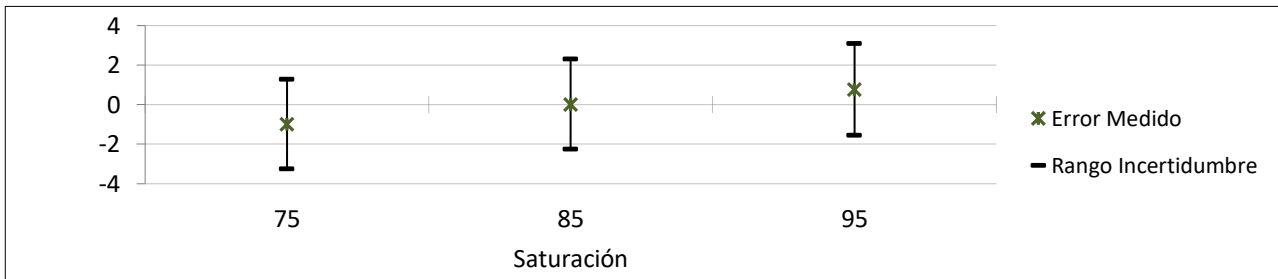

FRECUENCIA CARDIACA SPO2


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	59,00	-1,00	±	0,88
150	150,00	0,00	±	0,88

Unidad de la Medición
BPM

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	60,00	0,00	±	0,82
120	120,00	0,00	±	0,82
200	200,00	0,00	±	0,82

Unidad de la Medición
BPM

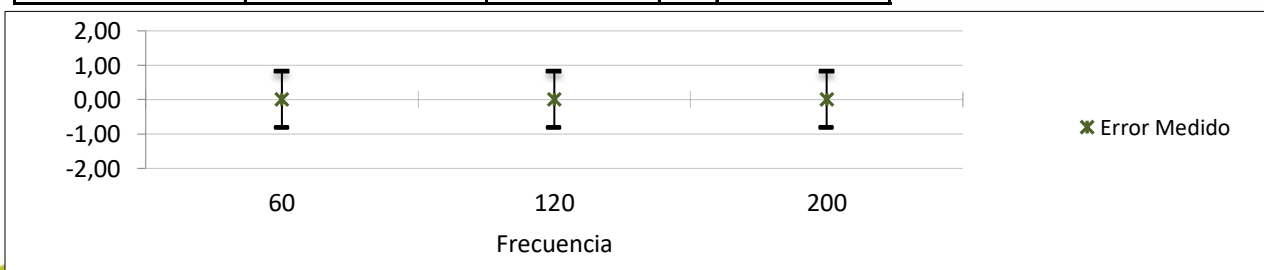

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	59,00	-1,00	± 0,74
120	118,50	-1,50	± 1,08
200	197,00	-3,00	± 1,10

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
30	29,00	-1,00	± 0,65
80	79,00	-1,00	± 0,74
150	149,00	-1,00	± 0,91

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
120	118,00	-2,00	± 0,85

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
80	79,00	-1,00	± 0,74

Unidad de la Medición
mmHg

ARTERIA PULMONAR (AP) IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
25	24,00	-1,00	± 0,62
10	10,00	0,00	± 0,62

Unidad de la Medición
mmHg

FIN DEL CERTIFICADO