

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J1941125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA: Brand	MINDRAY
MODELO: Model	BENEVIEW T5	SERIE: Serial	CM-3B134872
Inventario Institución: Institute Inventory	545468	UBICACIÓN: Location	UCI ADULTOS

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-11-26	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-11-26
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25,1 °C	Final: End	25,1 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %	Final: End	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN


INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01 (5V)

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó

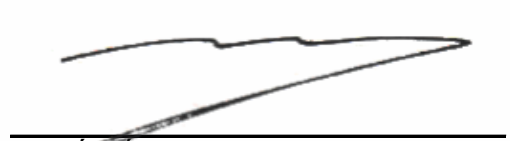
MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k=2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
80	81,00	1,00	$\pm$ 0,82	mmHg
120	120,50	0,50	$\pm$ 1,01	
200	196,50	-3,50	$\pm$ 1,01	

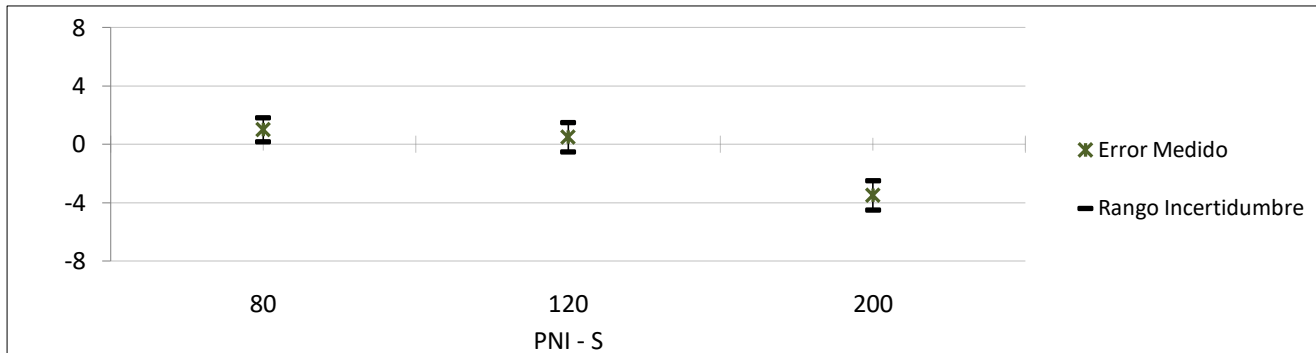

PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
50	50,50	0,50	$\pm$ 1,01	mmHg
80	82,50	2,50	$\pm$ 1,01	
150	153,50	3,50	$\pm$ 1,01	

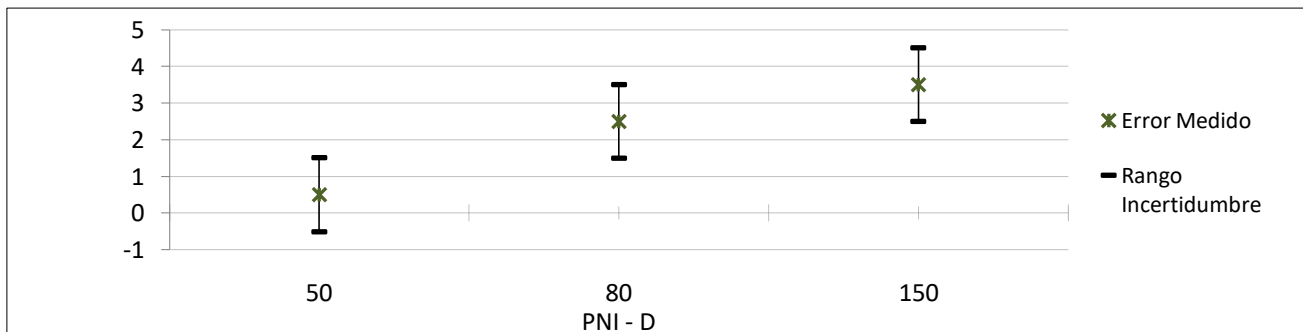

GASTO CARDIACO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
2,5	2,45	-0,05	± 0,10
5,0	4,65	-0,35	± 0,19
10,0	9,55	-0,45	± 0,30


Unidad de la Medición
L / min

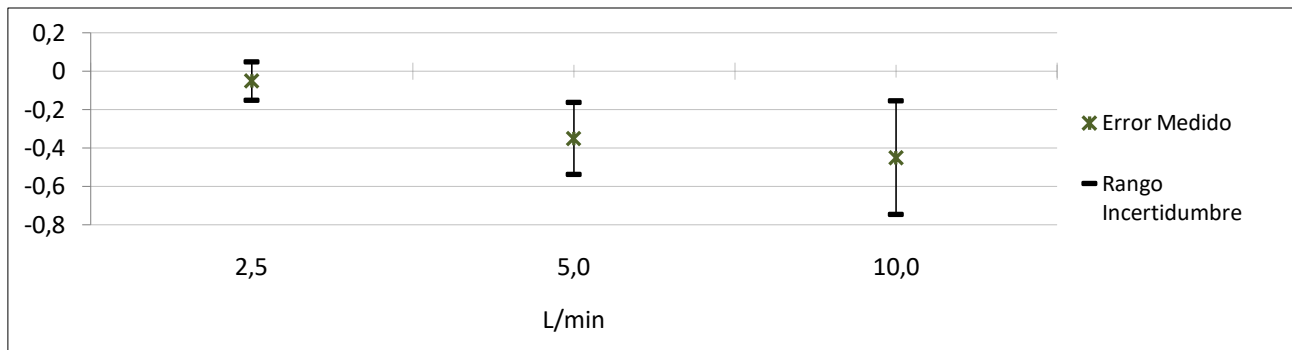

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
75	76,00	1,00	± 2,27
85	86,00	1,00	± 2,27
95	96,00	1,00	± 2,27

Unidad de la Medición
%

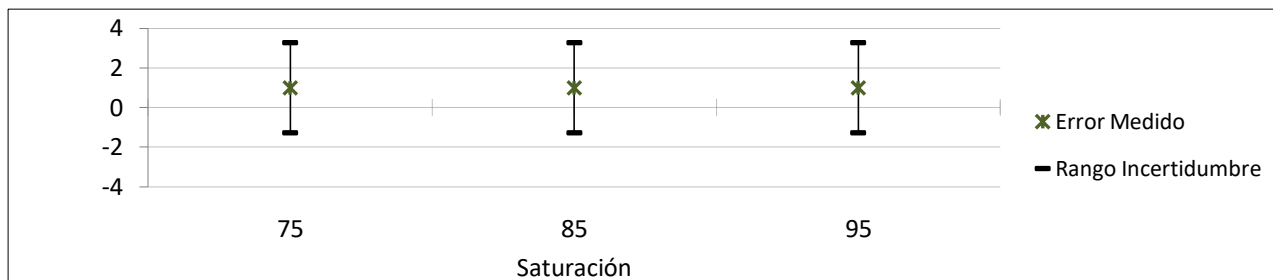

FRECUENCIA CARDIACA SPO2


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	60,00	0,00	± 0,88
150	150,00	0,00	± 0,88

Unidad de la Medición
BPM

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	60,00	0,00	± 0,82
120	120,00	0,00	± 0,82
200	200,00	0,00	± 0,82

Unidad de la Medición
BPM

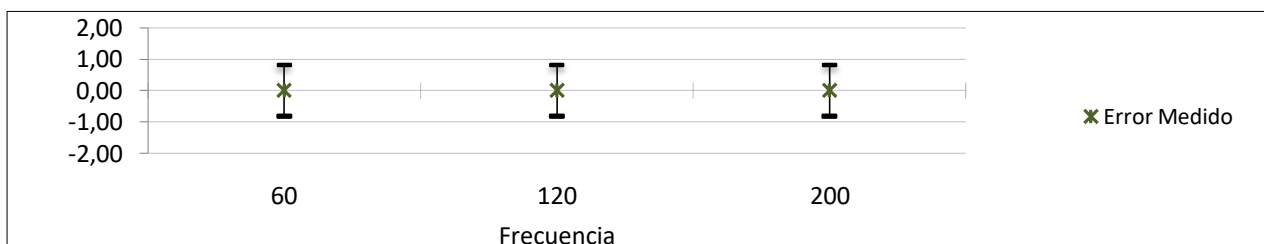

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	59,00	-1,00	±	0,74
120	119,00	-1,00	±	0,85
200	198,00	-2,00	±	1,10

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
30	30,00	0,00	±	0,65
80	79,00	-1,00	±	0,74
150	150,00	0,00	±	0,91

Unidad de la Medición
mmHg

ARTERIA PULMONAR (AP) IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
25	25,00	0,00	±	0,62
10	10,00	0,00	±	0,62

Unidad de la Medición
mmHg

FIN DEL CERTIFICADO