

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J0141225

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA: Brand	DRAGER	
MODELO: Model	VISTA 120S	SERIE: Serial	S2SNF4458	
Inventario Institución: Institute Inventory	573306	UBICACIÓN: Location	UCI NEONATAL	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-12-10	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-12-10	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25,1 °C	Final: End	25,1 °C	
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	59 %	Final: End	59 %	
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE			


DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE			
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA	
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó

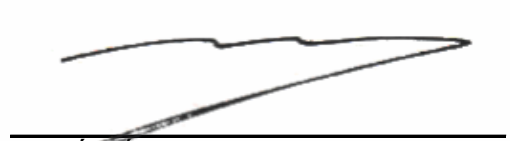
MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
80	81,00	1,00	$\pm$ 0,82	mmHg
120	122,00	2,00	$\pm$ 0,82	
200	199,00	-1,00	$\pm$ 0,82	

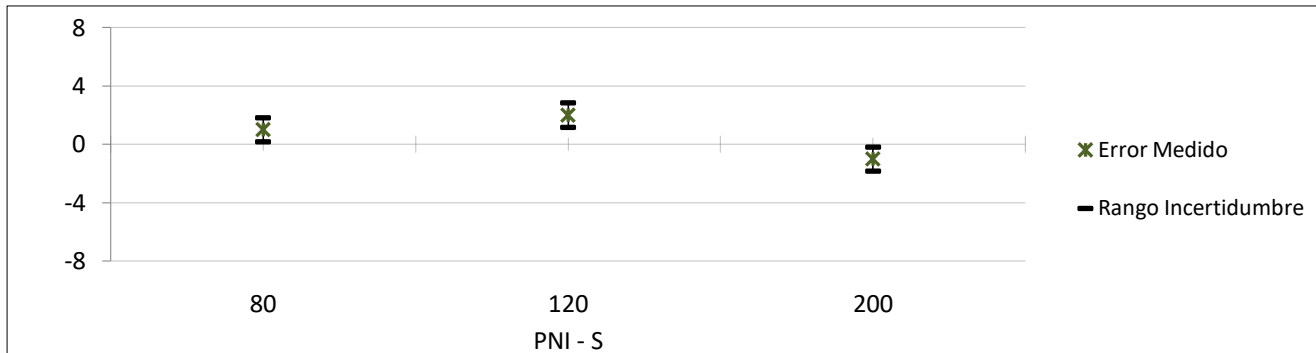

PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
50	52,50	2,50	$\pm$ 1,01	mmHg
80	82,00	2,00	$\pm$ 0,82	
150	151,50	1,50	$\pm$ 1,01	

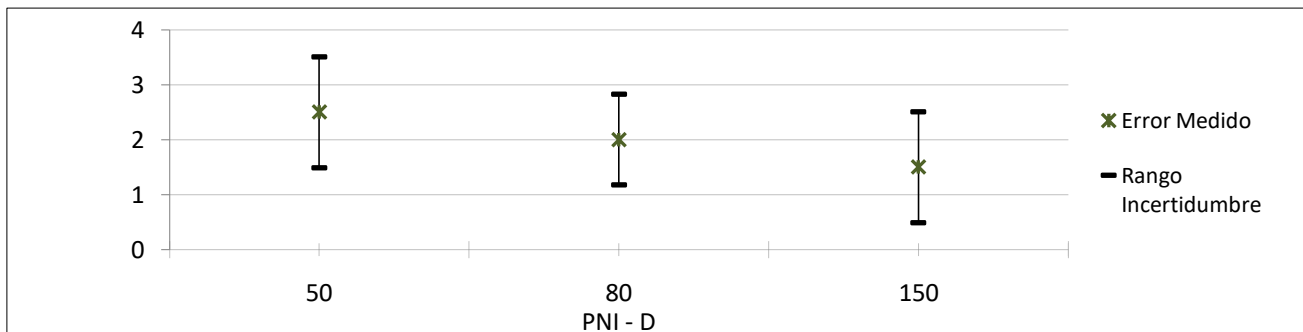

GASTO CARDIACO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
2,5	2,45	-0,05	± 0,08
5,0	4,89	-0,12	± 0,18
10,0	9,70	-0,30	± 0,29


Unidad de la Medición
L / min

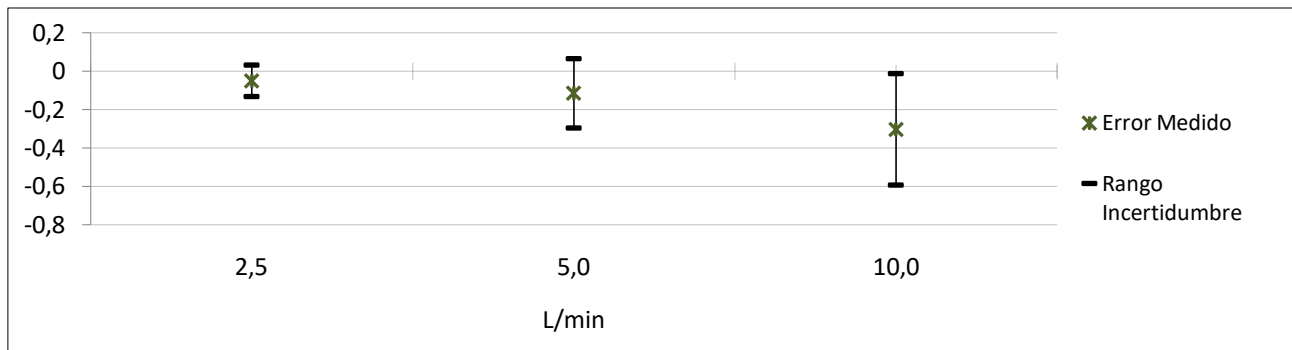

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
75	75,00	0,00	± 2,27
85	85,50	0,50	± 2,35
95	95,50	0,50	± 2,35

Unidad de la Medición
%

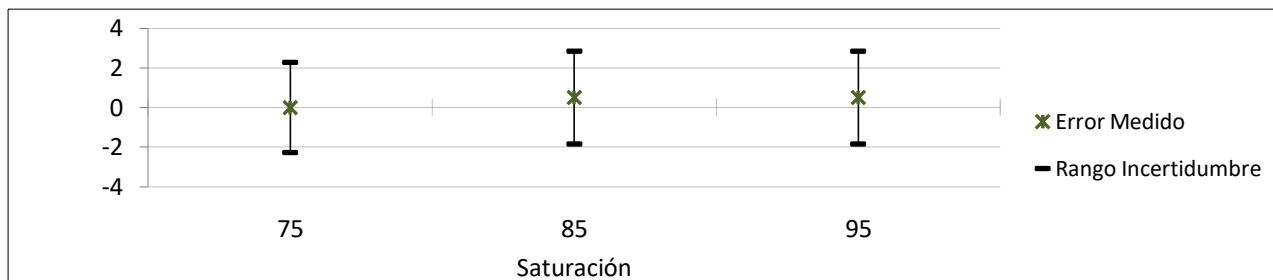

FRECUENCIA CARDIACA SPO2


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	60,00	0,00	± 0,88
150	150,00	0,00	± 0,88

Unidad de la Medición
BPM

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	60,00	0,00	± 0,82
120	120,00	0,00	± 0,82
200	200,00	0,00	± 0,82

Unidad de la Medición
BPM

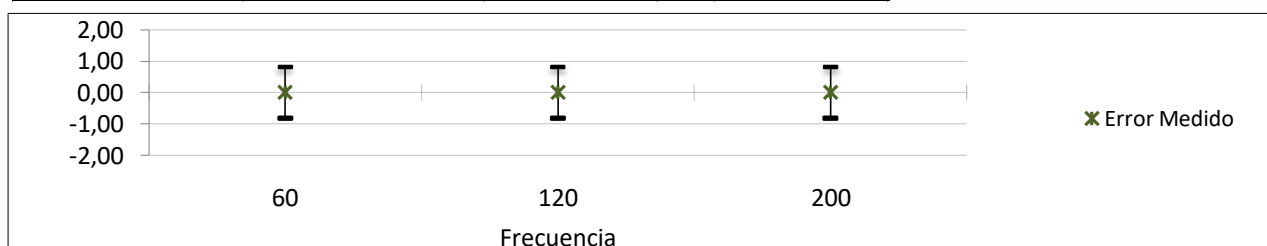

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	59,00	-1,00	±	0,74
120	119,00	-1,00	±	0,85
200	198,00	-2,00	±	1,10

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
30	30,00	0,00	±	0,65
80	80,00	0,00	±	0,74
150	150,00	0,00	±	0,91

Unidad de la Medición
mmHg

ARTERIA PULMONAR (AP) IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
25	25,00	0,00	±	0,62
10	10,00	0,00	±	0,62

Unidad de la Medición
mmHg

FIN DEL CERTIFICADO