

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M2251025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Device

MARCA: DRAGER

Brand

MODELO: VISTA 120 S

Model

SERIE: S2SNF4445

Serial

Inventario Institución: 573308

Institute Inventory

UBICACIÓN: INTERMEDIOS ADULTO

Location

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-10-28

Date of Receipt

Fecha Calibración: 2025-10-28

Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 23 °C **Final:** 23 °C

Temperature

End

HUMEDAD Rel. Inicial: 61 % **Final:** 61 %

Humidity

End

Lugar de Calibración: HOSPITAL SAN JORGE

Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

Institution

TELÉFONO: (606)3119058

Telephone

CIUDAD: PEREIRA

City

DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88

Address

Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

E-mail

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró



JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrologo

Metrologist

Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicio@coodesuris.com

Revisó



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

(6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k=2$


RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
80	81.25	1.25	$\pm$	0.96
120	124.50	4.50	$\pm$	1.01
200	200.50	0.50	$\pm$	1.01

Unidad de la
Medición

mmHg

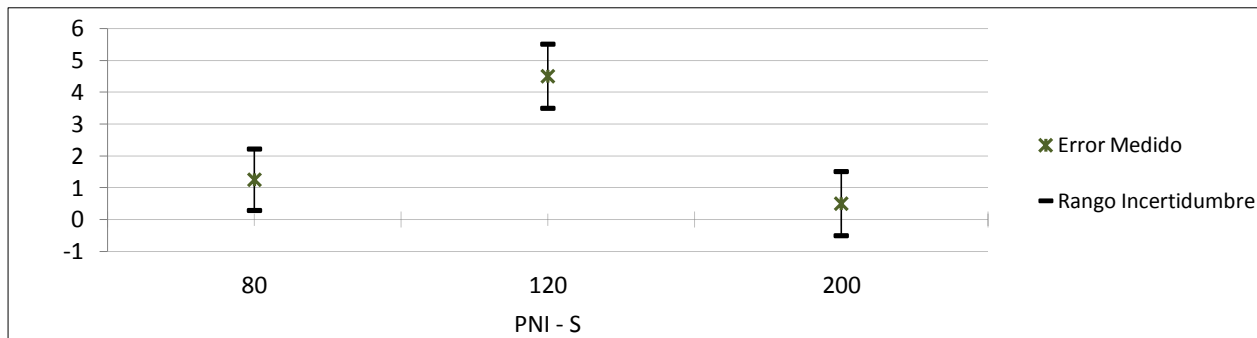


PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
50	52.25	2.25	$\pm$	0.96
80	82.50	2.50	$\pm$	1.01
150	151.75	1.75	$\pm$	0.96

Unidad de la
Medición


mmHg

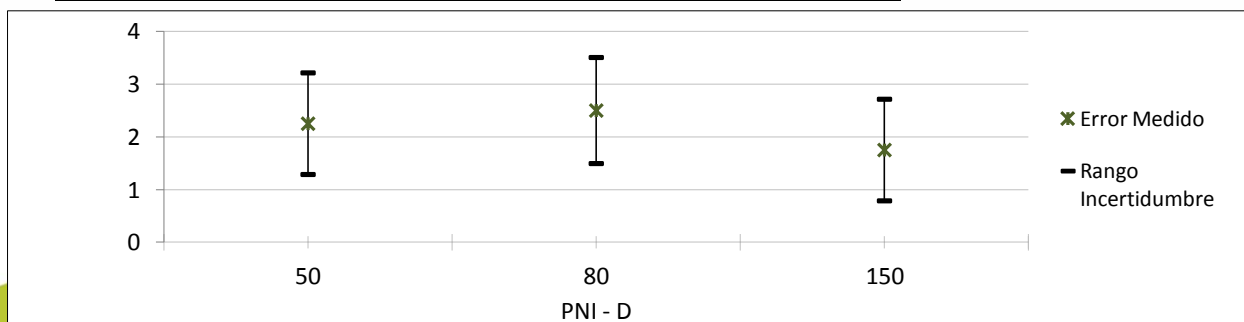

GASTO CARDIACO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
2.5	2.45	-0.05	±	0.08
5.0	4.84	-0.16	±	0.18
10.0	9.75	-0.25	±	0.29


Unidad de la Medición
L / min

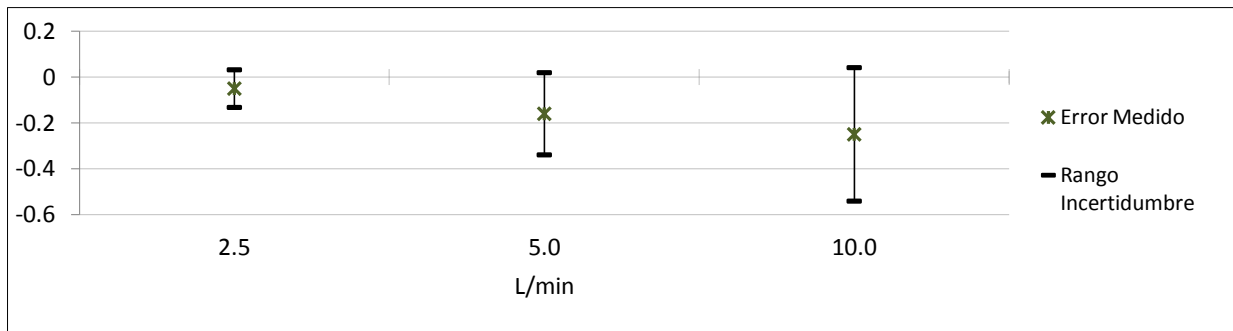

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
75	74.25	-0.75	±	2.33
85	85.00	0.00	±	2.27
95	95.00	0.00	±	2.27

Unidad de la Medición
%

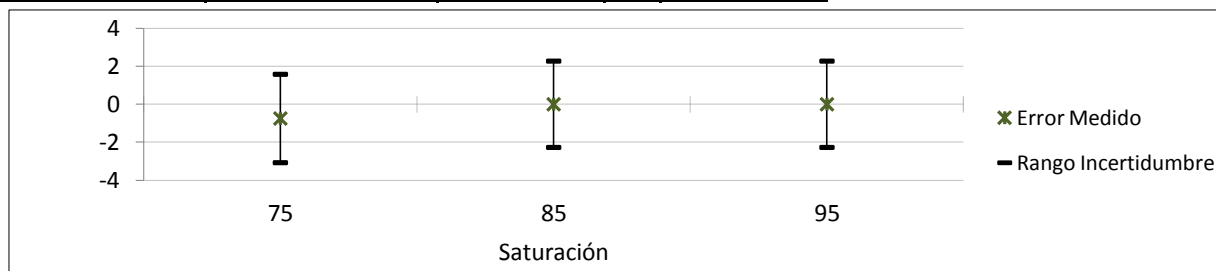

FRECUENCIA CARDIACA SPO2


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	60.00	0.00	±	0.88
150	150.00	0.00	±	0.88

Unidad de la Medición
BPM

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	60.00	0.00	±	0.82
120	120.00	0.00	±	0.82
200	200.00	0.00	±	0.82

Unidad de la Medición
BPM

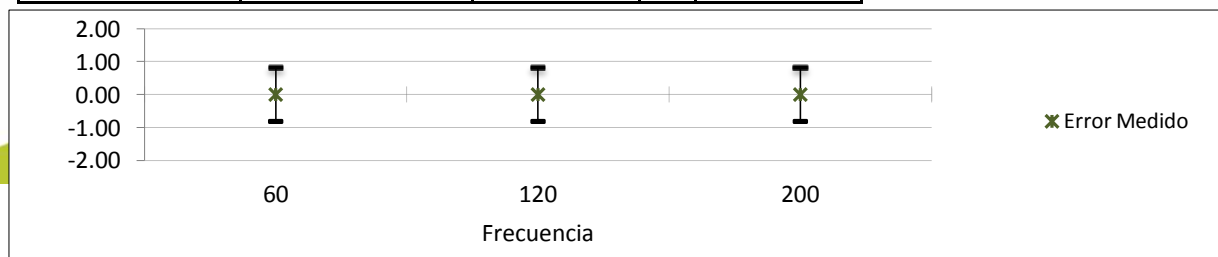

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	59.00	-1.00	±	0.74
120	119.00	-1.00	±	0.85
200	198.00	-2.00	±	1.10

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
30	29.00	-1.00	±	0.65
80	79.00	-1.00	±	0.74
150	149.00	-1.00	±	0.91

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
120	118.00	-2.00	±	0.85

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
80	79.00	-1.00	±	0.74

Unidad de la Medición
mmHg

ARTERIA PULMONAR (AP) IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
25	24.00	-1.00	±	0.62
10	10.00	0.00	±	0.62

Unidad de la Medición
mmHg

FIN DEL CERTIFICADO

