

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J0901125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA: Brand	PHILIPS
MODELO: Model	EFFICIA CM120	SERIE: Serial	CN92395093
Inventario Institución: Institute Inventory	572827	UBICACIÓN: Location	INTERMEDIOS PEDIATRÍA

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-11-11	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-11-11
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25,1 °C	Final: End	25,1 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	58 %	Final: End	58 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN


INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó

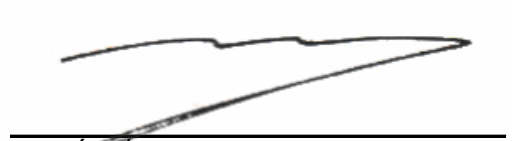
MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia.
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern.


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN ESTÁTICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
50	49,75	-0,25	$\pm$ 0,96
100	99,50	-0,50	$\pm$ 1,01
150	149,50	-0,50	$\pm$ 1,01
200	200,00	0,00	$\pm$ 0,82
250	249,50	-0,50	$\pm$ 1,01
300	299,50	-0,50	$\pm$ 1,01


Unidad de la Medición
mmHg

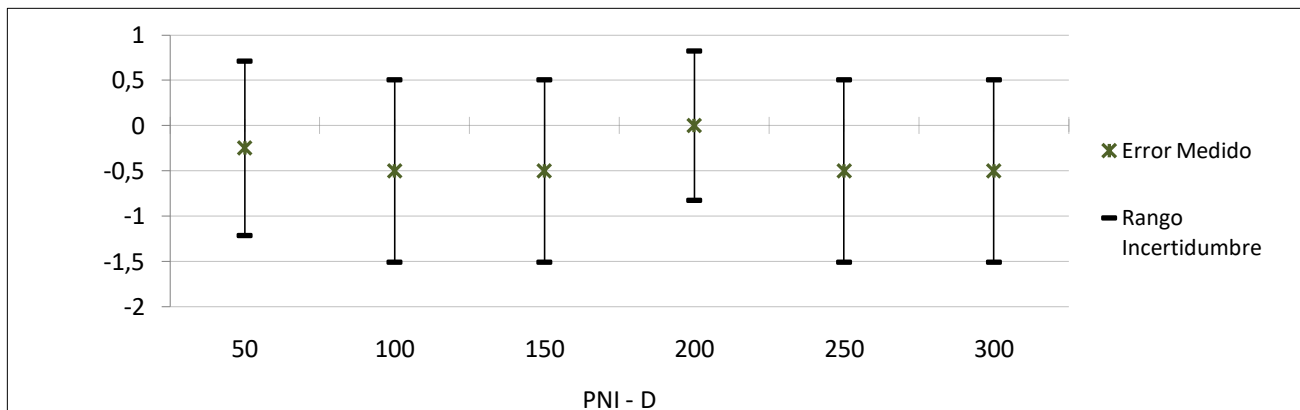

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
85	83,50	-1,50	±	2,35
90	89,00	-1,00	±	2,27
95	94,00	-1,00	±	2,27

Unidad de la Medición
%

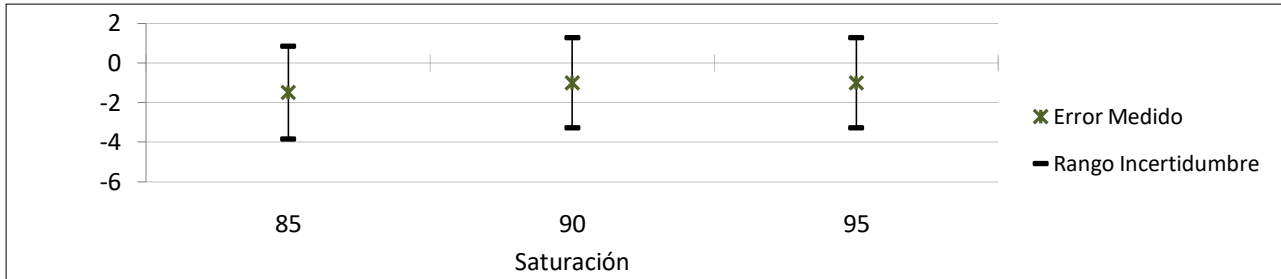

FRECUENCIA CARDIACA SPO2


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	60,00	0,00	±	0,88
150	150,00	0,00	±	0,88

Unidad de la Medición
BPM

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	60,00	0,00	±	0,82
120	120,00	0,00	±	0,82
200	200,00	0,00	±	0,82

Unidad de la Medición
BPM

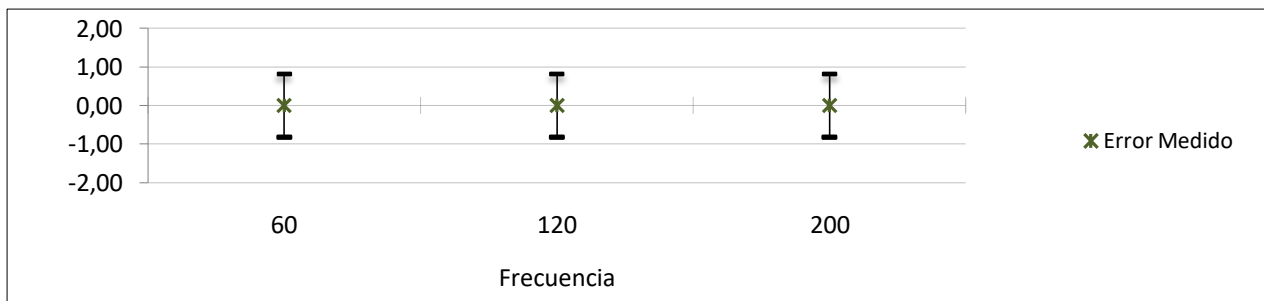

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	60,00	0,00	±	0,74
120	119,00	-1,00	±	0,85
200	198,00	-2,00	±	1,10

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
30	30,00	0,00	± 0,65
80	80,00	0,00	± 0,74
150	149,00	-1,00	± 0,91

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
120	119,00	-1,00	± 0,85

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
80	80,00	0,00	± 0,74

Unidad de la Medición
mmHg

ARTERIA PULMONAR (AP) IBP2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
25	25,00	0,00	± 0,62
10	10,00	0,00	± 0,62

Unidad de la Medición
mmHg

FIN DEL CERTIFICADO